

Руководство по эксплуатации

Головки эластичные стоматологические «Ortoflex-металл» по ТУ 9433-040-10614163-2015.


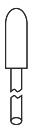

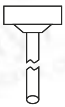
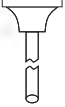
РУ №ФСР 2010/08181 от 08.09.2016

Назначение изделия

Головки предназначены для обработки ортопедических конструкций и изделий из нержавеющей сталей и твердых сплавов.

Технические характеристики

Рабочая часть - эластичная связка на основе натурального каучука, наполненная абразивом. В качестве абразива используется оксид алюминия. Головки напрессованы на хвостовик: тип 2 $\varnothing = 2,35$ мм цилиндрический.

				
TK19	TK20	TK21	TK22	TK23
612104274524060	612104274524060	612104275524095	612104042524140	612104041524155

Способ применения

Обработку вести при скорости до 12000 об/мин.

Комплект поставки

Головки -1, 2, 8, 10, 50, 100 шт. ; Руководство по эксплуатации - 1шт.; Упаковочная тара - 1 шт

Условия хранения и транспортирования

Головки в упакованном виде должны храниться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре от +5°C до +40°C.. Транспортирование при температуре от -50°C до +50°C.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие головок всем требованиям ТУ 9433-040-10614163-2015 при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 3 лет с момента выпуска.

Утилизация

Отходы при использовании головок утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, класс А.

Изготовитель

ООО «Целит», Россия, 394002 г. Воронеж, ул. Димитрова, 124и, тел: +7(473)237-61-06, 279-78-87

Заказать и купить Головки стоматологические «Ortoflex-металл»

вы можете на сайте workaut.by

или по телефону +375-17-360-29-40 или +375-29-612-93-03